



## Sistema CPAP IntelliPAP® Estándar Plus de DeVilbiss

### Mayor comodidad y mejores herramientas de informes.

El modelo IntelliPAP Estándar Plus ofrece la tecnología SmartFlex® de DeVilbiss, una función exclusiva de alivio de presión durante la exhalación. El modelo IntelliPAP Estándar Plus incluye mejores capacidades de registro de datos a través del sistema integrado de seguimiento de datos de cumplimiento SmartCode® y el sistema opcional de gestión de terapia SmartLink®.

IntelliPAP garantiza muchos años de rendimiento confiable y satisfacción del paciente gracias a sus confiables dispositivos electrónicos y alojamientos resistentes al agua, al igual que a su resistente cámara de humidificación Lexan® y placa de transferencia de calor de acero inoxidable. DeVilbiss nunca lo va a defraudar.



Serie DV53D

### Desempeño

- **Calidad:** tasa de fallo menor que el 1%, con el respaldo de una garantía de calidad superior por 3 años
- **Cumplimiento:** seguimiento remoto de datos de cumplimiento de forma gratuita a través de la tecnología SmartCode
- **Comodidad:** humidificación óptima y tecnología SmartFlex
- **Diseño:** diseño apilable que ocupa una superficie sumamente pequeña y funcionamiento silencioso (26 dBA)\*

# Sistema CPAP IntelliPAP Estándar Plus de DeVilbiss

## Diseño

- Armado simple e intuitivo
- Encendido/apagado\*\* automático que inicia el flujo de aire con la respiración del paciente
- Cable de alimentación de 2,4 m (8 pies) que ofrece una mayor flexibilidad de posicionamiento sin la voluminosa fuente de alimentación
- Recordatorios que alertan al paciente que debe reemplazar o verificar las piezas
- Incluye una conveniente bolsa de viaje
- Almohadillas grandes y antideslizantes en la parte inferior de la unidad para minimizar el movimiento en la mesa de noche




Usage Data	
Last 90 Days	
% Days of at least 4 hours (not continuous) in a 24 hour period	64%
Day Count	90
Days at least 4 hours	58
AHI	8.5
High Leak Flow Time	5%
NRG	1.75
EPI	.2
SmartCode	TMT/IT-4504-7D/2P
Adherence Score (4 continuous hours)	57% (20/30)

## Cámara de humidificación

- Protección contra el sobrellenado de la cámara
- Resistente a la corrosión, placa de acero inoxidable
- Deflexión única que aumenta el intercambio de aire y agua para alcanzar un nivel de humedad óptimo
- Capacidad de 400 ml para 8 horas de uso en la configuración más alta

## SmartCode

- Códigos de datos de uso en forma cifrada que se pueden comunicar por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto para redactar informes clínicos y de cumplimiento.

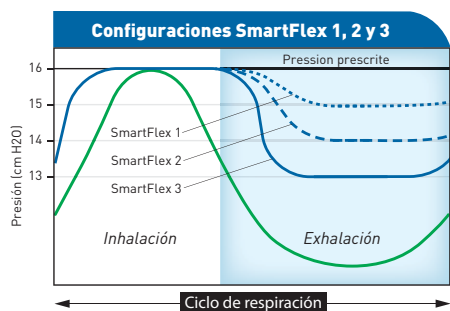

SmartFlex ofrece ajustes de reducción de presión que automáticamente reducirán la presión generada por el dispositivo IntelliPAP durante la exhalación y volverán a aumentar la presión al valor prescrito al iniciar la inspiración. Las configuraciones se relacionan con una caída de la presión exacta de 1 cm H<sub>2</sub>O, de manera que un ajuste de 1 = una caída de 1 cm H<sub>2</sub>O en la presión durante la exhalación.



El sistema de almohadilla nasal Aloha™ se adapta perfectamente a la unidad IntelliPAP



DeVilbiss Healthcare | 100 DeVilbiss Drive | Somerset, PA 15501 | EE. UU.  
800.338.1988 | 814.443.4881 | www.DeVilbissHealthcare.com